



REVÉE®

Revée Bra è una collezione di reggiseni post-operatori, che soddisfano tutti i requisiti specifici di un trattamento compressivo efficace, dopo interventi di aumento, riduzione o di rimodellamento del seno.

Campi di applicazione:
terapia compressiva post-operatoria in seguito ad un intervento di mastoplastica additiva, mastoplastica riduttiva, sostituzione protesi, mastopessi.



Totalmente
apribile



Disegnato
dai chirurghi



Traspirante,
asciugatura
rapida




Coppe
espandibili



LAETITIA BRA

REV.0301

REGGISENO POST-OPERATORIO

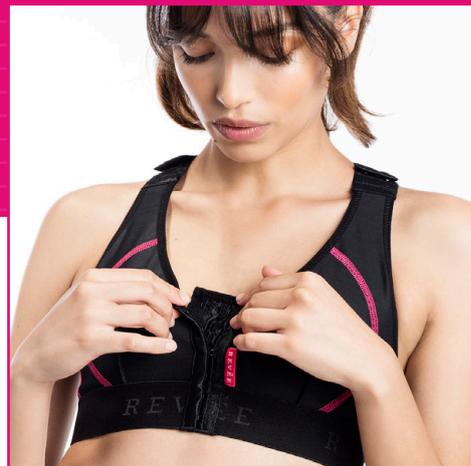

FDA
CLEARED







- 1 4 ganci regolabili sulle spalline.
- 2 Tessuto Air Feel traspirante sulla schiena.
- 3 3 ganci regolabili nell'apertura frontale per personalizzare il livello di compressione.
- 4 Supporto extra laterale in Lycra®.
- 5 Elastico in morbido tessuto jacquard by Revée® 4,5 cm.
- 6 Cucitura esterna per non irritare la zona aureola/capezzolo.
- 7 Coppe automodellanti si adattano perfettamente anche in caso di asimmetria delle mammelle.

Codice prodotto: REV.0301
 Taglie: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
 Colori:   
 Composizione: 74% poliammide, 26% elasthan
 Lavaggio:    

⚠ Avvertenze:

- Per **garantire l'efficacia**, la tollerabilità ed il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.
 - In caso di dubbi sulle modalità di applicazione, rivolgersi al personale del negozio o al proprio medico.
 - Identificare bene la taglia facendosi **consigliare** dal personale specializzato del negozio o dal proprio medico.
 - I **tessuti** utilizzati sono tutti certificati come **anallergici, non citotossici e latex-free**. Controllare comunque le composizioni sulle etichette interne per accertarsi di non presentare forme allergiche ai filati utilizzati.
 - **In caso di ferita chirurgica**, non mettere a diretto contatto fino a completa cicatrizzazione.
 - Prima di ogni lavaggio si raccomanda di **chiudere bene tutte le allacciature** in velcro e a ganci per evitare di danneggiare altri capi di biancheria.
- Suggerimento:** Procurarsi due reggiseni, della misura corretta, per un migliore decorso post-operatorio.

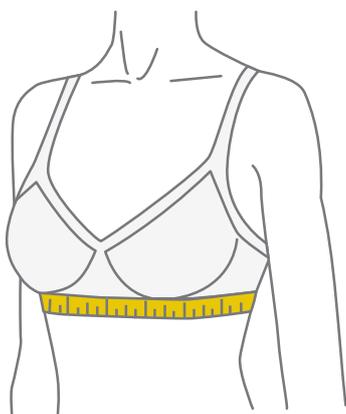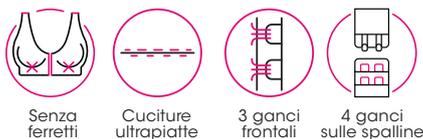

*NOTE: LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI
 SCHEDA TAGLIE DA CONSIDERARSI INDICATIVA

TAGLIA SOTTOSENO

XS	67 - 71
S	72 - 76
M	77 - 81
L	82 - 86
XL	87 - 91
XXL	92 - 96
3XL	97 - 101
4XL	≥ 101

REVÉE srl
 C.so Quintino Sella 131
 10132 Torino, Italia



www.revee.it support@revee.it

Servizio Clienti
 Lu / Ve 9:00 - 18:15
 Tel: +39 011 89 81 276

Revée Support WhatsApp
 Lu / Ve 9:00 - 18:15
 Cell: +39 391 490 5808