

| | |
|--|---|
| INDICE | |
| Montaggio e installazione della vaschetta e della poltrona | 2 |
| Poltrona da pedicure SPA, modello CALN (Ref. 4122B) | 3 |
| Tipi di massaggio | 4 |
| Impostazioni generali della poltrona e audio | 5 |
| Prestazioni della vaschetta e dettagli | 7 |
| Scheda tecnica | 7 |

Rilassati con un massaggio CALN

COMFORT
RELAX
SOLLIEVO
BENESSERE

Accomodatevi sulla nostra poltrona CALN e dimenticatevi di tutto il resto

Weelko riproduce il relax degli spazi termali in una linea speciale di poltrone e lettini specifici per SPA e wellness. Il calore del legno, il tatto gradevole delle tappezzerie e l'ampiezza delle dimensioni sono quegli elementi chiave che contribuiscono a creare un'atmosfera minimalista di calma e benessere.

Scopri la poltrona CALN nel suo interno.



Montaggio e installazione della vaschetta e della poltrona

Imballaggio

Il prodotto arriva in due imballi dalle seguenti dimensioni:

| | |
|------------|------------------|
| VASCHETTA: | 147 x 85 x 53 cm |
| POLTRONA: | 120 x 77 x 62 cm |

Installazione

Visualizza il nostro video dell'installazione e delle prestazioni della poltrona CALN nella nostra sezione WEELKO TV o attraverso il canale VIMEO.



*Il prodotto di queste immagini è visualmente diverso da quello finale

Poltrona da pedicure SPA, modello CALN (Ref. 4122B)

Descrizione

Poltrona da pedicure SPA dal design elegante ed ergonomico con tappezzeria in PU di alta qualità. È dotata di 2 motori che regolano l'inclinazione dello schienale e lo spostamento del sedile. È fornita di braccioli girevoli che permettono un facile accesso alla poltrona e che inoltre incorporano il portarifiuti per la manicure. Sistema integrato di massaggio meccanico e di aria a pressione. Vaschetta per i piedi con idromassaggio e doccia estensibile per il risciacquo. Poggiapiedi imbottito e regolabile in altezza.

Colore della tappezzeria

- Bianco

In dotazione

- Connessione per dispositivi MP3 e scheda SD.
- Telecomando per la selezione del tipo di massaggio.
- Vaschetta idromassaggio con doccia estensibile per il risciacquo.
- Ciotola portarifiuti per la manicure



Tipi di massaggio

Massaggio ad aria a pressione

Massaggio ad aria a pressione situato nel sedile e regolabile con il telecomando. Pressione ad aria regolabile.



Massaggio meccanico dorsale


Questo sistema è composto da un meccanismo a ruote situato nell'interno dello schienale. Agisce verticalmente e orizzontalmente rispetto alla schiena effettuando un massaggio dorsale, dalle cervicali alla zona lombare. Questo tipo di massaggio comprende diverse tecniche di massaggio.



Livelli di massaggio:

Ogni massaggio è composto da 7 diverse posizioni verticali, dalla parte inferiore della schiena alla parte superiore.

Modalità di massaggio:

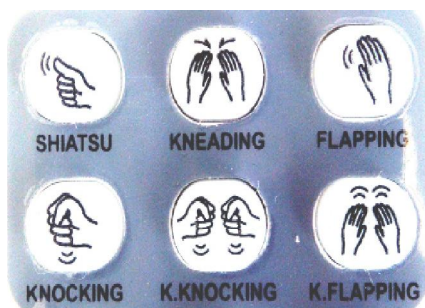

SHIATSU: Conosciuto anche come digitopuntura. Ispirato nel massaggio effettuato con le dita che esercitano pressione sulla schiena.

KNEADING: Massaggio delicato come se si impastasse con le dita.

FLAPPING: Massaggio a ritmo veloce simulando dei colpi con le palme delle mani aperte.

K. KNOCKING: Massaggio effettuato con i pugni.


K. FLAPPING: Massaggio combinato: impastare + colpetti con la palma delle mani.

Impostazioni generali della poltrona :



La prima sezione del telecomando della poltrona comprende varie funzioni, alcune delle quali solo sono disponibili in base al modello di poltrona. Nel caso del modello CALN 4122B i tasti inattivi sono: PULSATOR, MUSIC e HOT.

Il telecomando si accende con la funzione POWER ed il pulsante HEIGHT. Questo selettore permette scegliere la posizione del massaggio dorsale. Esistono 7 posizioni di altezze definite. Da 0 a 60 cm.

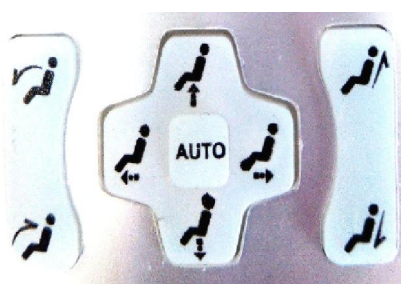


TIME: Regolazione del tempo di massaggio. Con questo tasto si può regolare il tempo di massaggio fino a 20 minuti con aumenti di 5 minuti per volta.

La seconda sezione del telecomando controlla l'impostazione della posizione della poltrona. I tasti sinistri permettono regolare l'inclinazione dello schienale. Premere il tasto superiore per sollevare lo schienale e il tasto inferiore per abbassarlo (da 50 a 75°).

I tasti centrali a forma di croce servono per regolare lo spostamento della poltrona e l'altezza.

Premere il tasto sinistro e il destro per spostare la poltrona avanti e indietro (spostamento da 0 a 10 cm). In questa versione della CALN a 2 motori non è possibile sollevare il sedile. Il tasto AUTO ha 4 modi definiti: A, B, C e D. I modi C e D non sono disponibili. Il modo automatico A combina un tipo di massaggio in ogni posizione della schiena. Il modo automatico B lavora ogni tipo di massaggio in ogni posizione della schiena.

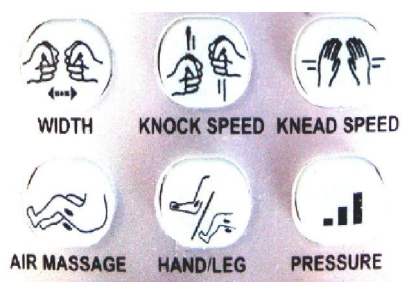

WIDTH: Questo selettore permette regolare l'ampiezza dell'azione delle ruote del massaggio. Da 34 a 42 cm. È possibile regolarlo in tutti i tipi di massaggio, eccetto nel massaggio FLAPPING (colpetti con la palma delle mani).

KNOCK SPEED: Regolazione della velocità del massaggio su 5 livelli distinti. Solo per il massaggio KNOCKING (pugni).

KNEAD SPEED: Regolazione della velocità del massaggio su 5 livelli distinti. Solo per il massaggio KNOCKING (pugni).

HAND/LEG: Non disponibile.

PRESSURE: Regolazione della potenza del massaggio ad aria a pressione. È composta da 3 livelli distinti.

Funzioni audio:

Connessione per dispositivi MP3, USB, scheda di memoria e presa per le cuffie.

Le impostazioni abituali audio si controllano attraverso gli ultimi 5 tasti del telecomando.

Play / Pausa
Traccia anteriore e seguente
Volume + / -



Prestazioni della poltrona

Poggiapiedi regolabile

La poltrona CALN è dotata di un poggiapiedi imbottito e regolabile in altezza tramite un semplice sistema che garantisce il comfort del professionista e del paziente in ogni momento.





Braccioli con portarifiuti per la manicure integrato

Entrambi i braccioli sono forniti di un comparto dove si trova una ciotola portarifiuti estraibile per la manicure. Uno dei braccioli è anche dotato di una linguetta dove collocare il telecomando della poltrona.



Prestazioni della vaschetta

Meccanismo di idromassaggio a luci

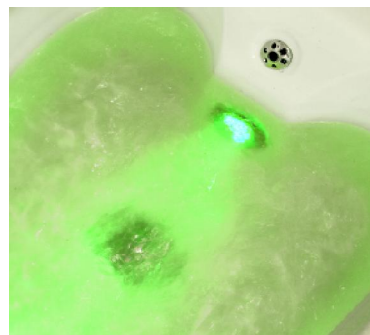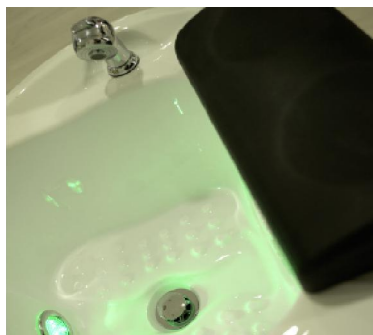

Doccia estensibile per il risciacquo



Meccanismo di scarico della vaschetta



Acqua fresca e calda



Caratteristiche tecniche:

Dimensioni e peso

Misure imballaggio (cm)

120 x 77 x 62 cm

147 x 85 x 53 cm

Misure prodotto W x H x D

130 x 85 x 150 cm

Peso lordo (kg)

65/65

Peso netto (kg)

110

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale

220V—240V

Frequenza

50 Hz/60Hz

Peso massimo di carica

120 kg

Spostamento verticale delle ruote

da 0 a 60 cm

Spostamento orizzontale delle ruote

da 34 a 42 cm

Pressione di massaggio ad aria

30 - 40 kPa

Angolo di regolazione dello schienale

da 50 a 75°

Spostamento avanti e indietro del sedile

da 0 a 10 cm

Regolazione del tempo di massaggio

Fino 20 min



Visita il nostro TECHNICAL INFO e scarica tutta l'informazione tecnica e commerciale di cui possa aver bisogno. Fotografie, dossiers, schede tecniche, ecc. Non fartelo scappare!

Dossiers | Technical Zoom



Accendi la WEELKO TV da weelko.com e vedrai come si installa la poltrona CALN in pochi semplici passi. Per chi preferisce un'immagine e mille parole!



vimeo



Presoterapia Weelko



Weelko a STS Beauty Barcelona 2013



Microdermoabrasione Weelko

weelko.com

Barcelona
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 93 824 90 20