

TRIATHLON PRO

ELETTROTERAPIA 4 CANALI | 424 PROGRAMMI

DISPOSITIVO CHE OLTRE AD AVERE UNA VASTA GAMMA DI PROGRAMMI SPORT, FITNESS BELLEZZA E REHAB, PREVEDE UNA SERIE DI PROGRAMMI SPECIFICI RIVOLTI A MIGLIORARE LA PERFORMANCE FISICA DEGLI ATLETI. I PROGRAMMI SPECIFICI PER IL TRIATHLON SONO SUDDIVISI IN AREE CORRISPONDENTI ALLE TRE DISCIPLINE SPORTIVE (NUOTO, CICLISMO, CORSA). UNA PRATICA GUIDA DI UTILIZZO VI AIUTERÀ A SCEGLIERE I PROGRAMMI PIÙ ADATTI A SECONDA DELLE DISTANZE CHE PRATICATE.

84 ACTION NOW | 60 SPECIALE TRIATHLON | 60 BELLEZZA | 58 FITNESS | 54 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION
53 SPORT | 23 MICROCORRENTI | 13 RUGHE-PELLE | 12 TENS E DOLORE | 3 REHAB | 3 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

Frequenza

0,3-150Hz *

Larghezza impulso

40-450µs *

Intensità

0-120mA per canale

Alimentazione

Batterie ricaricabili

Dimensioni

mm 100x160x35


Peso

gr 454

* In base al tipo di corrente

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Stimolatore TRIATHLON PRO
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionofresi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo

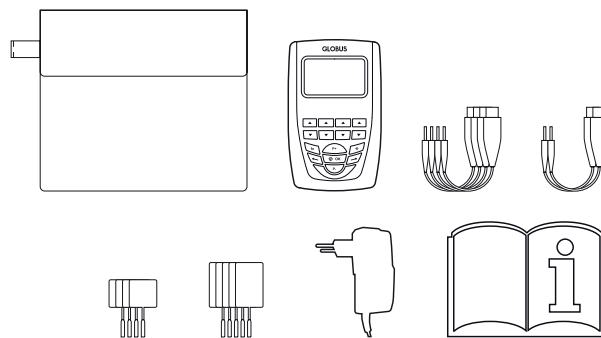

CE
0476



TENS



MENS



IONO



3S



ACTION NOW



RUN TIME



LAST 10



FUNZIONE PREFERITI



AUTO STIM



MULTI USER



PROGRAMMABILE



STIM LOCK



FUNZIONE 2+2



MY TRAINER



SYNCHRO STIM



WORK TIME



BATTERIA RICARICABILE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

TRIATHLON PRO

ELETTROTERAPIA 4 CANALI | 424 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

SPORT

Capillarizzazione
Riscaldamento
Riscaldamento pre-gara
Recupero attivo
Forza massimale
Forza resistente
Forza esplosiva
Reattività
Resistenza aerobica
Recupero post-gara
Decontratturante
Ipertrofia

FITNESS

Rassodamento
Rassodamento Bio-Pulse
Modellamento
Modellamento Bio-Pulse
Tonificazione
Aumento massa
Body sculpting
Definizione
Jogging
Fitness anaerobico
Fitness aerobico
Prevenzione crampi

BELLEZZA

Drenaggio
Drenaggio Bio-Pulse
Lipolisi
Lipolisi post-parto
Massaggio relax Bio-Pulse
Massaggio energetico
Massaggio tonificante
Massaggio connettivale
Braccia gonfie
Capillarizzazione viso
Miglioramento tono pelle
Drenaggio post-parto
Rassodamento post-parto
Rassodamento seno
Modellamento seno
Effetto lifting
Definizione
Linea

RUGHE - PELLE G-PULSE

Microlifting seno
Microlifting décolleté
Microlifting viso
Elasticità pelle
Inestetismi cellulite
Collagene Bioskin
Rughe
Rughe occhi
Rughe di espressione
Smagliature
Rinforzo unghie
Bio peeling
Ematoma

REHAB

Atrofia quadricipite (con protesi al ginocchio)
Recupero post intervento LCA
Prevenzione sublussazione spalla

TENS E DOLORE

Tens antalgica convenzionale
Tens antalgica modulata
Tens endorfinica
Dolori mestruali
Dolore cronico
Dolore cervicale
Dolore muscolare
Dolore ginocchio
Dolore spalla (sindrome scapolo-omerale)
Lombalgia cronica
Borsiti-tendiniti
Osteoartrite

MICROCORRENTI

Epicondilite
Periartrite scapolo-omerale
Ripristino muscolare
Contusione
Edema
Ulcera pelle
Sciatalgia
Lombalgia
Nevralgia brachiale
Dolore acuto
Dolore articolare
Torcollo
Colpo di frusta
Spondilosi cervicale
Distorsione spalla
Distorsione ginocchio

Tunnel carpale
Osteoartrite
Distorsione caviglia
Infiammazione tendine d'Achille
Infiammazione tendine rotuleo
Infiammazione cuffia rotatori
Infiammazione tendinea

INCONTINENZA

Incontinenza mista
Incontinenza da stress
Incontinenza URGE

IONOFRESI

SPORT SPECIALI

- NUOTO

Forza resistente
Lavoro aerobico
Decontratturante
Defaticante
Recupero affaticamento spalla

- CICLISMO

Lavoro aerobico base
Lavoro aerobico hard
Forza resistente
Decontratturante
Recupero affaticamento ginocchio MCR
Forza massimale
Defaticante

- CORSA

Lavoro aerobico
Forza resistente
Decontratturante
Defaticante
Recupero tendine d'Achille MCR

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La lista di programmi "3S" include 54 combinazioni di parametri. I programmi "3S" si caratterizzano per un ritardo di attivazione dei canali 3 e 4 rispetto ai canali 1 e 2. La Serial Sequential Stimulation permette di stimolare la muscolatura in catena cinetica grazie ai tempi di attivazione differenziati dei distretti muscolari interessati.

ACTION NOW

La lista di programmi "Action Now" include 84 combinazioni di parametri. Tale modalità viene consigliata soprattutto in ambito sportivo o per la preparazione atletica dove si vuole sommare la contrazione muscolare indotta da uno stimolatore ad un lavoro svolto con sovraccarichi sia in forma dinamica che isometrica.