

IMBRACATURE PER SOLLEVATORI FRONTALI/VERTICALIZZATORI

Ref. 300-x Imbracatura lombare

Ref. 310-x Imbracatura lombo-dorsale



Descrizione

Imbracatura sagomata per sollevamento e trasporto di persone in posizione verticale, disponibile in versione bassa (Lombare) e alta (lombo-dorsale).

L'imbracatura è costituita da:

- corpo di Skay (accoppiato PVC/tessuto polipropilene), imbottito e bordato con fettuccia polipropilene
- due cinghie lunghe in polipropilene nero per gambe
- due cinghie corte in polipropilene nero per tronco
- cinghie con tre asole in polipropilene per attacco al verticalizzatore
- una maniglia sul retro in polipropilene per facilitare il corretto posizionamento da parte dell'operatore al paziente

Imbracature disponibili nelle taglie: Medium (M), Large (L).

Destinazione d'uso

Ausilio utilizzato per supportare il paziente, con limitate capacità di movimento, durante gli spostamenti o trasporti mediante sollevatori mobili, in maniera sicura e confortevole.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Identificazione prodotto


Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y123621	
Identificativo di Registrazione BD/RDM: Ref. 300-M Ref. 300-L Ref. 310-M Ref. 310-L	2014274/R 2014276/R 2014277/R 2014278/R	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore MDD	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2019	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Materiali	corpo di Skay (accoppiato PVC/tessuto polipropilene), imbottito e bordato con fettuccia polipropilene
Dimensioni	Come indicato nella tabella Misure [mm]
Attacchi al sollevatore	due cinghie lunghe in polipropilene nero per gambe due cinghie corte in polipropilene nero per tronco
Regolazioni di attacco al bilancino	cinghie con tre asole in polipropilene per attacco al verticalizzatore
Tipo di regolazione	Manuale
Spostamento del paziente	n. 1 fettuccia a maniglia sul retro
Imbottitura gambe	No
Poggia-testa	No
Portata massima	180 kg
Altri standard di riferimento	UNI EN ISO 10535


Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Misure

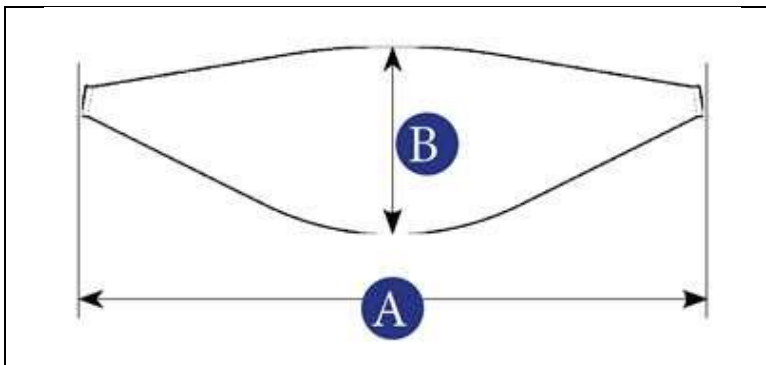

Modello: Imbracatura Lombare

Codice	Taglia ↓	A	B
300-M	M	1060	325
300-L	L	1410	370

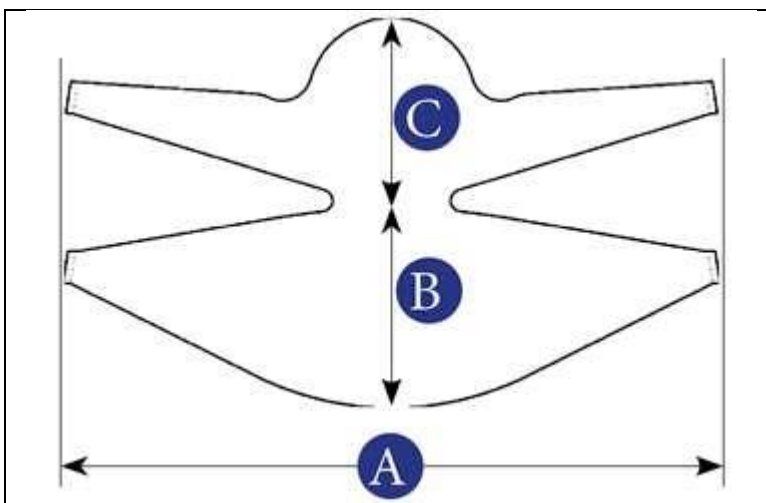

Modello: Imbracatura Lombo Dorsale

Codice	Taglia↓	A	B	c
310-M	M	1060	325	315
310-L	L	1410	370	370

Entrambe le imbracature sono fornite di fettucce esterne di larghezza 25 mm con asole regolate su 3 lunghezze diverse (280, 380, 480 mm dall'estremità cucita).

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Verificare lo stato del prodotto prima di ogni utilizzo.
CONSERVAZIONE	Conservare il prodotto al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per un'accurata pulizia si consiglia il lavaggio in acqua con temperatura Max 40°C. NON avvicinare l'imbracatura a fonti di calore e NON stirare.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il sollevatore.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
3X*0-x**	Imbracatura per sollevatori frontali/verticalizzatori	1

* Codice variante a seconda del modello di imbracatura scelto.

**Codice variante a seconda della taglia di imbracatura scelta.

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	30/07/2020	Prima emissione della scheda tecnica.

