

Comet[®] Pro



**Il meglio di potenza, prestazioni
ed allestimento senza nessun
compromesso**



Un breve giro per negozi? Una giornata in città o una gita in campagna? Il nuovo **Comet PRO** non teme le distanze e garantisce comfort, sicurezza e stile!

Lo scooter offre prestazioni di guida straordinarie che, combinate con le opzioni avanzate di sicurezza, lo rendono il modello perfetto per una guida veloce, performante e assolutamente affidabile.

Grazie alla sua eccezionale dotazione e all'estetica moderna, **Comet PRO** combina al meglio potenza, prestazioni ed allestimento.



Prestazioni e controllo al top

Grazie alla dotazione di guida ottimizzata e alle potenti batterie da 2 x 75 Ah, lo scooter **Comet Pro** ti permette di affrontare tragitti più lunghi e complessi, e di spingerti anche oltre i semplici confini urbani!

Le grandi ruote anteriori e posteriori da 13", combinate ad un sistema di sospensioni di ultima generazione, consentono di affrontare agevolmente marciapiedi e ostacoli, garantendo una guida assolutamente tranquilla e confortevole.

Il dispositivo per la riduzione automatica della velocità in curva, inoltre, è un'ulteriore garanzia di stabilità e sicurezza.

Omologato TÜV

Lo scooter **Comet Pro** ha superato tutti i rigorosi test dell'ente certificatore tedesco TÜV, a conferma del fatto che si tratta di un modello assolutamente sicuro.

Comet Pro dispone di una dotazione di sicurezza all'avanguardia, che prevede ad esempio la doppia leva di sblocco motore e il dispositivo per la riduzione automatica della velocità. **Comet Pro**: la garanzia di spostarsi senza pensieri su qualunque terreno!

Design moderno e compatto

Progettato con l'ottica di garantire il massimo comfort e precisione di marcia, lo scooter **Comet Pro** assicura massima maneggevolezza e controllo del mezzo, anche in spazi ristretti e particolarmente impegnativi. Il manubrio ergonomico, inoltre, garantisce all'utente una postura ottimale, in modo che la guida risulti assolutamente rilassata e confortevole. I braccioli sono regolabili in altezza, profondità ed inclinazione. Lo schienale è reclinabile ed abbattibile. Anche la profondità della seduta è regolabile.



Caratteristiche e opzioni



Sospensioni dedicate

Per assicurare una guida più confortevole e sicura, anche in presenza di terreni sconnessi.



Incollato alla strada

Invacare Comet è stabile anche quando spinto ad alte velocità per garantire un viaggio sereno e senza pensieri.



Piantone sterzo regolabile

Inclinazione variabile del piantone grazie alla leva posta sul manubrio.



Manubrio ergonomico

La curvatura ergonomica, progettata nel nostro centro di ricerca e sviluppo, consente una guida confortevole offrendo la migliore postura e gestione di guida.



Display LCD intuitivo

Display intuitivo e di facile comprensione per la massima sicurezza e tranquillità durante la guida.



Luce freno

Luce freno ben visibile che si accende in automatico quando lo scooter sta rallentando.




Leva di sblocco motore

Leva sblocco motore con doppio sistema di sicurezza per evitare la messa in folle accidentale.



Dispositivo per la riduzione automatica della velocità

Riduzione automatica della velocità in curva per la massima sicurezza di guida.

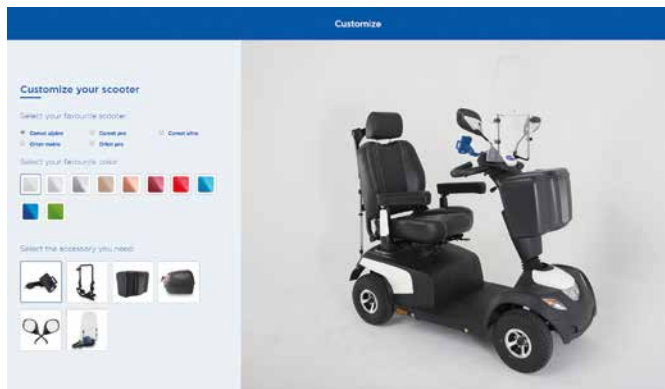








Ampie possibilità di personalizzazione




Scelta tra 10 diversi colori carenatura e oltre 25 accessori per personalizzare lo scooter secondo il proprio gusto personale. Per saperne di più, consultare il sito dedicato: www.invacarescooter.com

Dati tecnici

Consulta il nostro sito per avere maggiori informazioni e usa il nostro configuratore per conoscere nel dettaglio il tuo scooter.

	Larghezza schienale	Profondità seduta	Altezza seduta da pianale	Altezza schienale	Ingombro Laterale	Lunghezza totale	Peso da vuoto
							
Comet Pro	510 mm	460 mm	Min. 440 mm Max. 515 mm	630 mm	665 mm	1450 mm	136 kg

	Componente più pesante	Peso max utilizzatore	Capacità batteria	Diametro di sterzata	Altezza max ostacoli superabili	Altezza da terra	Pendenza max di sicurezza
							
Comet Pro	approx. 63 kg	160 kg	2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM	2750 mm	100 mm	100 mm	10°

	Autonomia	Velocità max	Capacità motore	1. Potenza di picco
				
Comet Pro	55 km	15 km/h	550 W / 1600 W ¹	

Codici NT (configurazione standard):

12.21.27.009 (*) + 12.24.06.157 + /.163 + /.169

Nr. Repertorio DM: 100063/R

(*) In alternativa, per omogeneità funzionale, a "Carrozzina elettrica per uso esterno"

Colore carenatura

Bianco perla	Blu zaffiro	Verde giada	Beige Luxor	Rame Cristallino
				
Rosso carminio	Grigio Cromo	Argento Diamante	Blu elettrico	Rosso diaspro
				

Rivestimento

Nero vinile


Tel.: +39 0445 380059
Fax: +39 0445 380034
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
THIENE (VI) - Italy


Yes, you can.®