



Ausilio di trasferimento e spostamento COMFORTmobility

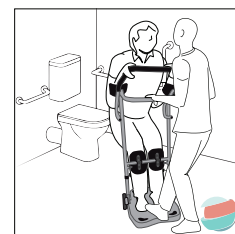

Ausilio per il sollevamento e trasferimento di utenti con problemi alle articolazioni inferiori e conseguente mobilità limitata; consente all'assistito di partecipare alla movimentazione ed al care-giver di operare con una buona postura evitando carichi eccessivi e danni ad articolazioni e schiena. L'impugnatura ampia con diversi punti di presa, la pedana poggiapiedi rivestita con materiale antiscivolo rendono ulteriormente sicuro lo spostamento.

- ↔ 60 cm
- ↗ 61,5 cm
- ↔ base 50,5 cm
- ↔ min. base 35,5 cm
- ↗ base 52,5 cm
- ↔ ginocchiere 38,5 cm
- ↕ 118,5 cm
- 📦 15 kg
- max 160 kg

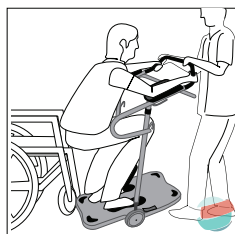

Il particolare design permette all'utente di trovare una posizione di movimentazione sicura ed accogliente attraverso una leggera inclinazione in avanti del maniglione centrale.

La coppia di ginocchiere imbottiti, regolabili in inclinazione ed altezza (7 differenti posizioni), massimizza il comfort e l'adattabilità di COMFORTmobility alle esigenze del paziente.

Caratteristica molto importante è la possibilità di richiudere rapidamente l'ausilio quando non utilizzato, per poter essere facilmente trasportato dall'assistente grazie al ridotto ingombro.



codice articolo	descrizione
TR COMMOBILI	Ausilio di trasferimento e spostamento COMFORTmobility

Le quattro ruote piroettanti posizionate al di sotto della base di appoggio e le due ruote laterali fisse da 5" permettono al care-giver di trasferire agevolmente l'utente tra diversi ambienti (spostandolo ad esempio tra due diverse stanze oppure in bagno).

I freni di stazionamento, fondamentali per la sicurezza nelle fasi di sollevamento e seduta, sono evidenziati con colore verde/rosso: vengono azionati simultaneamente con pedale ed agiscono sulle due ruote fisse.

La struttura dell'impugnatura presenta un supporto centrale, si tratta di una comoda presa che favorisce la movimentazione (seduto-in piedi e viceversa) da parte dell'utente riducendo lo sforzo sugli arti inferiori.

ACCESSORIO per COMFORTmobility - Cinghia di supporto

Questa cintura lombare funge da imbragatura di supporto per l'utente, è fissata sul COMFORTmobility attraverso la coppia ganci presenti sulla struttura dell'ausilio.

La morbida cinghia sostiene l'assistito durante lo spostamento aumentando la sicurezza del trasferimento: ideata per utenti con ridotta forza negli arti inferiori e difficoltà nel controllo del corpo e dei movimenti.

La struttura della cintura consente di regolare il fissaggio in relazione alle dimensioni dell'utilizzatore.



- ↗ 175 cm
- ↕ 22 cm



codice articolo	descrizione
TR CINGSUP	Cintura di supporto lombare per COMFORTmobility

Assistente alla deambulazione TUTTO IN UNO



La barra di sollevamento "a forca" permette l'alzata in piedi dell'utente mentre l'unità manubrio regolabile in altezza sostiene la deambulazione dell'utente: previene le cadute, non intralcia il passo e fornisce la massima sicurezza. L'imbragatura di supporto, fissata in quattro punti, garantisce un sollevamento confortevole ed un posizionamento stabile non ostacolando (anche visivamente) il cammino. Le dimensioni ridotte del sollevatore consentono l'uso in ambito domestico e/o riabilitativo. Disponibile in due differenti versioni: con portata massima di 150 kg oppure di 200 kg.

codice articolo	descrizione
TR SOLTUTTINI	Assistente alla deambulazione TUTTO IN UNO