

DATA DI STAMPA: Giovedì, 18 Aprile 2024



► VAI ALLA SCHEDA ON-LINE www.chinesport.it/go/03016/

03016 LETTO AURORA NEW

Letto da degenza a 4 sezioni e 3 snodi. Telaio rete in doghe di legno e guide reggimaterasso, struttura in profili d'acciaio e finiture in faggio naturale e legno massello.

Ha tutte le funzionalità richieste a un letto da degenza per migliorare la permanenza del paziente e facilitare il lavoro del personale assistente o dei familiari.

- Due supporti per asta sollevamalato e asta porta flebo.
- Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V DC e pulsantiera.
- Sezione piedi con regolazione a cremagliera.
- Altezza variabile regolabile mediante due motori elettrici indipendenti inseriti internamente ai pannelli delle testate del letto.
- Inclinazione in posizione di Trendelenburg e contro-Trendelenburg tramite comando sulla stessa pulsantiera.
- Sponde a scorrimento verticale a due montanti fissate alle testate tramite dispositivi di scorrimento. Tasti blocco/sblocco superiori ed inferiori per abbassamento e rimozione delle sponde.
- Gambe integrate nelle spalliere complete di 4 ruote girevoli Ø 12,5 cm dotate ognuna di freno indipendente.
- Dotato di asta solleva malato completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile.



02072 - LETTO AURORA

CODICI LEA (suggeriti)


GU n.65 del 18/03/2017 Suppl. Ordinario n. 15

- 18.12.10.009
- 18.12.27.003x2

Specifiche tecniche e dimensioni


| | |
|--|-----------------------------------|
| Dimensioni (totali) : | 218,5 x 105 cm |
| Dimensioni (rete degenza) : | 200 x 89 cm (divisa in 4 sezioni) |
| Regolazione in altezza : | 43 - 86 cm (elettrica) |
| Altezza testata : | 48,5 cm |
| Ruote : | Ø 12,5 cm con freno indipendente |
| Peso : | 112 kg |
| Portata max : | 135 kg |
| Carico di lavoro in sicurezza : | 170 kg |
| Regolazione sezione testa : | 0 - 75° (elettrica) |
| Regolazione sezione gambe : | 0 - 30° (elettrica) |
| Regolazione sezione piedi : | manuale a cremagliera |
| Alimentazione : | 230 V - 50/60 Hz |
| Movimento Trendelenburg e contro-Trendelenburg : | fino a +/-12° |
| Rete : | doghe di legno |

Accessori

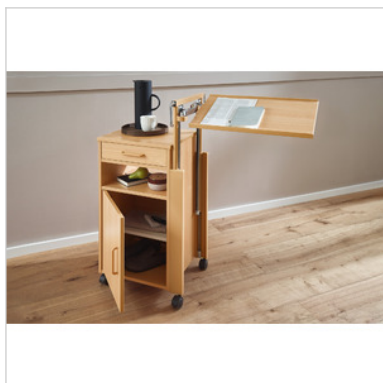


XBM007 COMODINO CON TAVOLO SERVITORE REGOLABILE

Comodino con tavolo basculante regolabile in altezza e inclinazione, corpo rivestito in plastica, finitura in faggio.

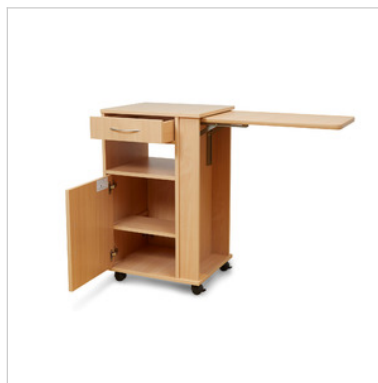


XBM008 COMODINO CON TAVOLO SERVITORE

Comodino con tavolo ribaltabile, rivestito in plastica, finitura in faggio.

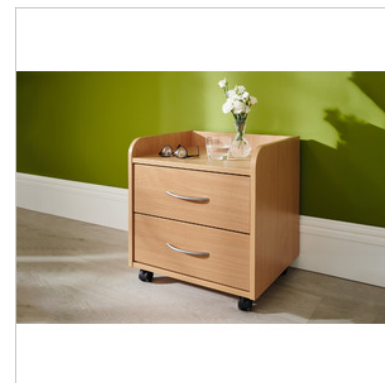


XBM009 COMODINO BASSO

Comodino con corpo plastificato e finitura in faggio naturale.

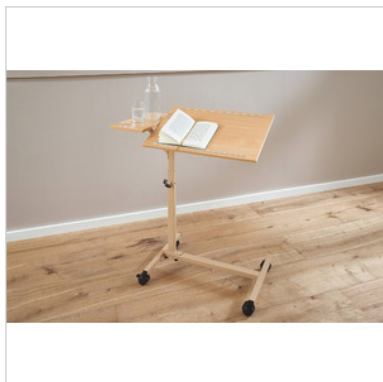

XBM010 TAVOLO SERVITORE DUO

Regolabile in altezza e inclinazione del piano d'appoggio e sezione tavolo fissa, con finitura in faggio.

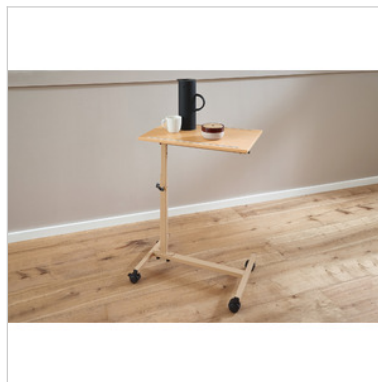


XBM011 TAVOLO SERVITORE SOLO

Regolabile in altezza e inclinazione del piano d'appoggio, con finitura in faggio.

Altre immagini dell'articolo



02072 - LETTO AURORA

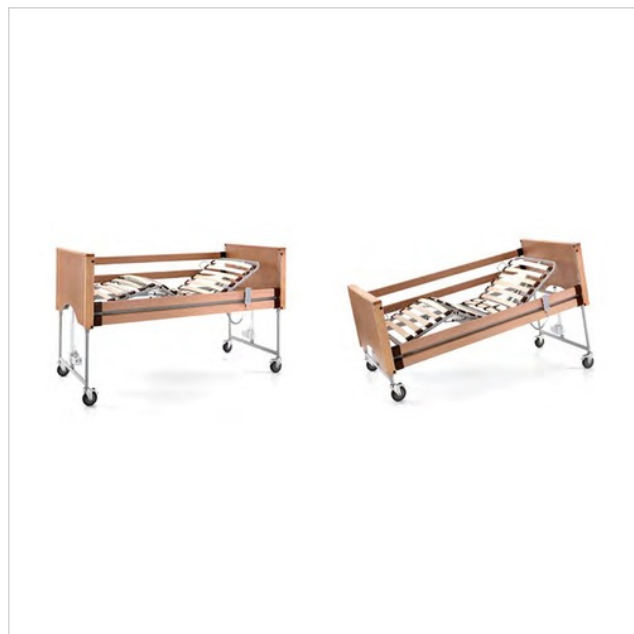

Regolazione altezza e posizione di Trendelenburg/contro-Trendelenburg