



## EUCLIDE 4S EL

### Letto a 3 snodi 4 sezioni Elettrico

Il letto è predisposto per asta alzamalato e asta portaflebo. Sezione testa, gambe e piedi regolabile a mezzo sistema elettrico dotato di telecomando. Letto in tubo di acciaio verniciato (polar white) ø40x20x1,5 mm a sezione rettangolare rinforzata con barra trasversale. Struttura a rete elettrosaldata. Spalliere portanti verniciate e pannello in polipropilene. Il dispositivo medico si compone di un piano rete, di pediera e testiera di supporto e di un sistema motorizzato di movimentazione delle sezioni mobili

### 3-joint 4-section electric bed

The bed is set-up for patient lifting pole and IV stand. Head, leg and foot section adjustable with remotely-controlled electric system. Bed with coated steel tubular frame (polar white) ø40x20x1.5 mm with rectangular cross-section reinforced with crossbar. Electro-welded mesh structure. Coated weight-bearing backrest and polypropylene panel. The medical device consists of a wire bed frame, a support footboard and headboard, and a motorised system for moving the mobile sections

### EUCLIDE 4S EL 01


Versione con ruote / Version with wheels

### Dati Tecnici / Technical Specifications

Peso / Weight	senza ruote 45.2 kg without wheels 45.2 kg con ruote 47.6 kg with wheels 47.6 kg
Portata (peso paziente) / Capacity (weight of the patient)	135 kg
Massimo carico di lavoro (carico di lavoro in sicurezza) paziente + materasso + accessori / Maximum workload (safe workload) patient + mattress + accessories	170 kg
Ingombro (inclusa manovella ripiegata) L x P x H (mm) / Max overall dimensions (including folded crank) L x D x H (mm)	senza ruote 900 x 2040 x 955 mm without wheels 900 x 2040 x 955 mm con ruote 930 x 2120 x 940 mm with wheels 930 x 2120 x 940 mm
Altezza rete dal pavimento H (min/max) / Height of the wire bed frame from the ground H (min/max)	senza ruote 320 / 500 mm without wheels 320 / 500 mm con ruote 305 / 485 mm with wheels 305 / 485 mm
Regolazioni in altezza della rete / Wire bed frame height adjustments	4
Incremento per ogni posizione / Increase in every position	60 mm
Dimensioni piano rete L x P / Wire bed frame dimensions L x D	895 x 1990 mm
Profondità singole sezioni della rete / Depth of the single sections of the wire bed frame	735-283-385-385 mm
Inclinazione sezione mobile testa / Head mobile section inclination	0° - 60°
Inclinazione sezione mobile gambe / Leg mobile section inclination	0° - 34°
Altezza sezione gambe/piedi (max) / Leg/foot section height (max)	220 mm
Tensione di alimentazione / Supply voltage	100 ÷ 240 Vac
Frequenza / Frequency	50 ÷ 60 Hz
Assorbimento max / Max absorption	3.15 A
Tensione del gruppo motore / Motor unit voltage	24 Vdc
Tensione di uscita dal gruppo motore (Vdc) / Motor unit output voltage (Vdc)	24 ÷ 29
Batteria tampone per abbassamento di emergenza / Back-up battery for emergency lowering	9 Vdc
Dimensioni dell'imballo / Dimensions of the packaging	2105 x 950 x 210 mm
Peso totale con imballo / Total weight with packaging	senza ruote 50.2 kg without wheels 50.2 kg con ruote 52.6 kg with wheels 52.6 kg
Peso del materasso (max) (kg) / Weight of mattress (max) (kg)	20 kg
Peso degli accessori (max) / Weight of accessories (max)	15 kg



- Ruota frenante e direzionale / Braking and directional wheel

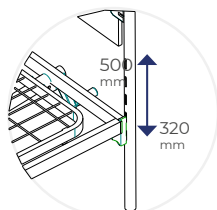

- Regolazione altezza del piano rete / Wire bed frame height adjustment