



**ESCURSIONE IN ALTEZZA DEL
PIANO RETE DA 28 A 80CM
CONFORME A IEC 60601-2-52**



Alegio_{NG}: progettato con passione!

Grazie al moderno design in legno naturale, il letto **Alegio_{NG}** si adatta perfettamente sia all'ambiente istituzionale che a quello domiciliare. L'escursione del piano rete di ben 52 cm facilita i trasferimenti e la gestione del paziente. Disponibile nella versione a stock, con pannelli. Camila e sponde Flora a due barre colore ciliegio (come foto a fianco), e nella versione modulare con ampie possibilità di personalizzazione. Numerosi sono inoltre gli accessori disponibili.

Trusted Solutions, Passionate People





Range perfetto!

Il letto **Alegio_{NG}** è proposto nella versione modulare con la rete con movimento elettrico dell'alzatesta e dell'alzagambe e sistema rastofix sui piedi.

Funzionalità e sicurezza al primo posto

Grazie al sistema di sgancio rapido, il letto **Alegio_{NG}** è facilmente smontabile e trasportabile. Con un semplice click è possibile, infatti, dividere la rete dalla base in modo da rendere più agevole la sua movimentazione. Il tutto senza richiedere l'utilizzo di alcun attrezzo.

E' inoltre disponibile un carrellino per il trasporto.

Questo prodotto risponde alle nuove e più stringenti norme in materia di sicurezza dei letti medici secondo la IEC 60601-2-52.

Alta configurabilità

Grazie all'ampia gamma di pannelli e sponde è possibile adattare il letto alle proprie esigenze:

- Versione con pannelli Camila e sponde in legno a due barre Flora di colore ciliegio, come nella figura di prima pagina in basso a sinistra
- Versione con pannelli Susanne e sponde Britt a tre barre di colore ciliegio, faggio o bicolore, come illustrato in questa pagina in alto

- Versione con pannelli Vibeke (colore ciliegio) e sponde in metallo abbattibili Verso II, come riportato nella prima pagina in alto.

L'allungamento del piano rete è inoltre possibile nella versione con pannelli Vibeke mediante l'applicazione dell'apposito kit di allungamento completo di reggimaterasso.

Caratteristiche e optional



Snodo centrale di aggancio

Le due sezioni della rete sono state rinforzate grazie al nuovo sistema centrale di aggancio.



Sgancio rapido

Questo meccanismo facilita l'operazione di montaggio e smontaggio del letto.



Particolare della rete


Staffa a U per pannelli Vibeke e alloggiamento alzamalati.

Caratteristiche e optional



Rete elettrica e cremagliera Rastofix

Alzatesta e alzagambe con movimento elettrico indipendente. La parte finale dei piedi è regolabile grazie al sistema a cremagliera Rastofix.

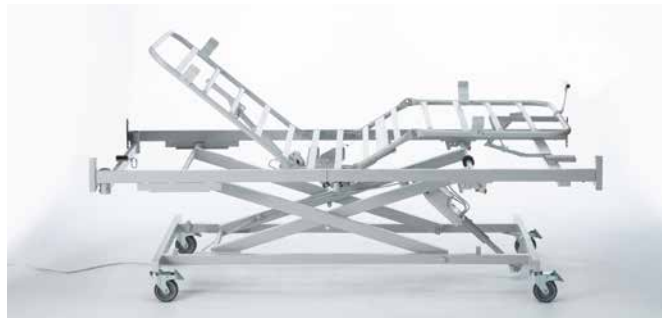

Solo rete con base con ruote

Disponibile la versione solo rete con base (senza pannelli e senza terminali di aggancio).



Sistema Rastofix

Sistema di regolazione alzapiedi Rastofix con maniglia.



Facile da smontare

Lo sgancio rapido facilita l'operazione di montaggio e smontaggio della rete rispetto alla base.



Carrello

Per facilitare il trasporto e lo stivaggio (optional).



Pannelli Camila

In colore ciliegio, compatibili solo con sponde Flora.



Pannelli Vibeke

Facili da smontare e compatibili con sponde Verso II (non dotate di corsie di scorrimento).



Pannelli Susanne

In colore faggio, compatibili con sponde in legno.



Pannelli Susanne

In colore ciliegio, compatibili con sponde in legno.



Sponde Flora

A due barre, colore ciliegio, compatibili solo con testate Camila.



Sponde Verso II

Sponde abbattibili in acciaio.



Sponde in legno a 3 barre Britt V

In colore faggio, compatibili con pannelli Susanne.



Sponde in legno a 3 barre Britt V

In colore ciliegio, compatibili con pannelli Susanne.

Optional



Estensione in altezza

Grazie a questo kit aggiuntivo, la sponda può essere alzata di 15 cm. Unità di misura: pezzo singolo (solo con sponde Britt).



Kit di allungamento rete

Allungamento della rete di 15 cm completo di archetto reggi-materasso (solo con pannelli Vibeke).



Carrello per il trasporto

Pratico e ideale per il noleggino.



Accessori

Numerosi gli accessori disponibili: lampada regolabile, maniglia di presa, coprisponde etc.

Dati tecnici



Invacare
Alegio_{NG}

Larghezza esterna ¹:
900 mm
Larghezza interna:
900 mm



Lunghezza esterna:
2110 mm
Lunghezza interna:
2000 mm



Regolazione
in altezza ²:
280 mm/
800 mm



Dimensioni delle
singole sezioni
della rete:
800-230-
300-670 mm



0 - 70°
Angolo alzatasta



0 - 33° ³
Angolo
alzagambe



Invacare
Alegio_{NG}

0 - 18°
Angolo alzapiedi



78 kg ⁴



SWL 170 kg
Peso massimo
utente 135 kg



Componente più
pesante:
35 kg

Conforme alla norma
per la sicurezza dei letti
medici IEC 60601-2-52

- 1/** senza sponde.
2/ con ruote da 100 mm.
3/ con motore alzagambe.
4/ con pannelli testata e pediera senza sponde.

NB/ Il letto non deve essere utilizzato da persone al di sotto dei 12 anni di età o da pazienti con una corporatura equivalente a quella di una persona di 12 anni o più giovane.

Colore



Grigio chiaro



Faggio



Ciliegio

Codici NT: 18.12.10.003+ 18.12.12.103 + 18.12.27.103+12.30.09.103+24.36.06.103+codici ISO aggiuntivi
Nr Repertorio DM: 103788/R

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE.
PRODOTTO COMMERCIALIZZATO