

Softform Active[®] 2 RX



Una soluzione completa

COMPRESSORE DIGITALE INTUITIVO | COSTRUZIONE MODULARE



Un sistema antidecubito che offre un valido aiuto nello scarico della pressione

La nuova versione del materasso *Invacare Softform Premier Active RX*, grazie al suo design esclusivo, aggiunge alle caratteristiche del materasso statico per pazienti ad alto rischio, i benefici del materasso ad aria a superficie variabile.

Con il semplice tocco di un pulsante, i pazienti possono trarre beneficio oltre che dal materasso *Softform Premier*, anche dagli elementi ad aria alternata inseriti tra i due strati di schiuma del materasso.

Grazie al modello *Softform Premier* clinicamente testato, questi inserti ad aria forniscono una garanzia addizionale nella prevenzione delle ulcere di pressione.

Superficie statica ad alta prevenzione


Il materasso è composto da una schiuma di alta qualità lavorata a torre. L'efficace sagomatura migliora la gestione del microclima e la redistribuzione della pressione, per tutti i pazienti ad alto rischio di ulcere da pressione. La superficie statica può essere facilmente trasformata in dinamica, grazie all'aggiunta del compressore, per assistere il paziente nel trattamento delle ulcere da pressioni gravi.

Nuovo compressore Active RX

Il nuovo compressore digitale prevede un ciclo di gonfiaggio alternato 1:2 di 10 minuti. Questo sistema contribuisce a migliorare il comfort del paziente, garantendo una perfusione ottimale e un'efficace ossigenazione dei tessuti. Il nuovo compressore è molto silenzioso per un riposo ancora migliore.

Una soluzione completa per il paziente

Il materasso è composto da una mousse ad alta resilienza lavorata "a torre" (modello *Softform Premier*) e da un inserto ad aria collegato ad un compressore a pressione alternata. In modalità statica il materasso mantiene le sue proprietà di prevenzione ad alto rischio, mentre in modalità dinamica il materasso si trasforma in una superficie a pressione alternata. Il tutto avviene senza dover spostare il paziente, riducendo così al minimo ogni disagio.

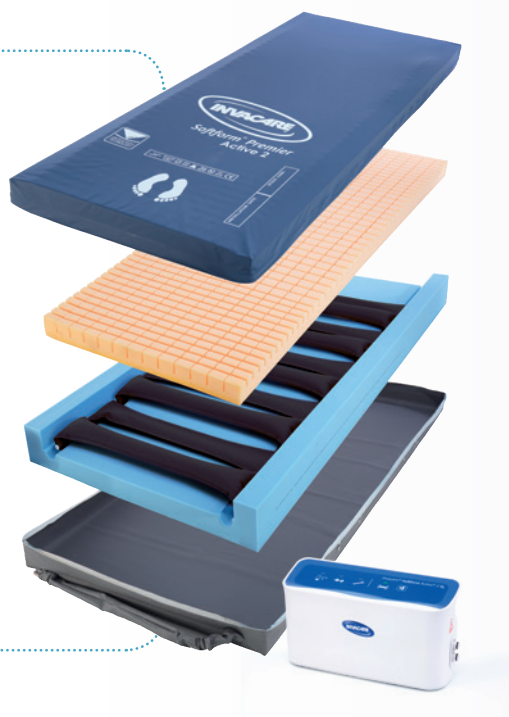

5

ASPETTI CHIAVE

Dalla costruzione modulare al compressore Plug'n'Play...

1 Superficie statica in schiuma di alta qualità

- ▶ Il paziente è sempre a contatto con una superficie ad alta prevenzione, anche in caso di black-out elettrico.

2 Costruzione modulare

- ▶ Tutti i componenti possono essere facilmente sostituiti, riducendo al minimo i costi di gestione



3 Compressore Plug'n'Play

- ▶ Un'interfaccia intuitiva rende facile l'attivazione e l'utilizzo

5 Auto-regolazione del sistema

- ▶ Non è necessaria alcuna regolazione della pressione perchè il compressore eroga il corretto livello di pressione in base al peso del paziente

4 Riduzione delle forze di taglio grazie al meccanismo 'Glide'

- ▶ Lo speciale meccanismo "Glide" riduce significativamente le forze di taglio se utilizzato in combinazione con letti a movimentazione della rete. EPUAP suggerisce di evitare di sottoporre la cute alle forze di pressione e di taglio, in quanto sono entrambi considerati i fattori che maggiormente contribuiscono allo sviluppo delle ulcere da pressione (EPUAP 2014).

Dati tecnici ▼


Per maggiori informazioni, consulta il nostro sito internet www.invacare.it



Larghezza ▼



Lunghezza ▼

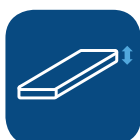

Altezza ▼



Peso totale ▼



Peso massimo
paziente ▼



Massima temperatura
di lavaggio ▼

Materasso Softform premier Active 2

830-900mm*
1000-1030-1050-
1150-1200mm

1810-2100mm*

152 mm

14 kg

247.6 kg

80°



Profondità ▼



Larghezza ▼



Altezza ▼



Peso ▼

* Consultare scheda d'ordine

Compressore

105 mm

275 mm

155 mm

1.75 kg

Colore ▼



Blu baltico

Nota: il colore può differire leggermente rispetto a quanto qui riportato

Norme di riferimento ▼

Il materasso è prodotto in conformità dei seguenti Standard:

European Standard: BS EN 597-1 Cig
European Standard: BS EN 597-2 Match
BS7177:1996 Crib 5.

Compressore:

Livello sonoro: ≤ 24 dB
Ciclo completo: 10 minuti (ciclo 1:2)

Ignifugità:

BS7177:2008

Altre informazioni ▼

- ▶ Superficie di alta qualità lavorata a castelletto
- ▶ Supporto dinamico quando richiesto
- ▶ Clinicamente provato
- ▶ Per pazienti ad alto ed altissimo rischio
- ▶ Fodera ignifuga secondo Crib5
- ▶ Peso massimo paziente 247,6kg
- ▶ Materasso disponibile in varie misure

L'assistenza infermieristica è un elemento chiave nella prevenzione delle piaghe da decubito. Questo materasso può dare un contributo positivo se utilizzato all'interno di un piano di prevenzione delle ulcere da pressione complessivo. Formazione, valutazione clinica e pianificazione di attività basate sulla vulnerabilità, sono fattori fondamentali nella gestione delle ulcere da pressione. Esistono diverse scale di rischio che aiutano nel processo formale di individuazione del livello di rischio di sviluppo di piaghe da decubito. Tuttavia accanto alla valutazione formale, è consigliato considerare anche la valutazione da parte personale infermieristico (valutazione informale).

Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
THIENE (VI) - Italy



Yes, you can.®